

LMArte

LM

feel the
difference



STYLE ITALIANO
SHADE GUIDES

Muotoile mestariteoksia

LMArte



Kerrosta taidolla - LM-Arte-instrumenteilla onnistut

LM-Arte instrumenttisesti tarjoaa hammaslääkärille uudenlaisia instrumentteja esteettiseen paikkaushoitoon. Instrumentit on kehitetty yhteistyössä Style Italiano -hammaslääkäriryhmän kanssa, joka on erikoistunut esteettiseen hammashoitoon. Yhdistelmämuovin kerrostamiseen suunnitellut kärjet on valmistettu korkealaatuisesta ja huippukiillotetusta LM-DuraGradeMax -superteräksestä, johon muovi ei tartu.

Setin instrumentit on värikoodattu ja nimetty käyttötarkoituksen mukaan helpottamaan ja nopeuttamaan paikkaustoimenpiteitä.

LMArte by Style Italiano

Suunnittelijat: Walter Devoto,
hammaskirurgian tohtori ja Angelo Putignano, LT,
hammaskirurgian tohtori.



Style Italiano on ryhmä esteettiseen korjaavaan hammashoitoon erikoistuneita klinikoita ja tutkijoita. Lisätietoja Style Italianon verkkosivuilta ja Facebookista -skannaa QR-koodit.



Lisätietoa ja klinisiä
videoita löydät
skannaamalla
QR-koodin ja vierailemalla
sivulla
[www.lm-dental.com/
LM-Arte.](http://www.lm-dental.com/LM-Arte)





LM-Arte Applica

LMErgoSense

LM 46-49 ES

LMErgoMax

LM 46-49 XSI



LM-Arte Applica Twist

LMErgoSense

LM 464-494 ES

LMErgoMax

LM 464-494 XSI



LM-Arte Modella

LMErgoSense

LM 442-443 ES

LMErgoMax

LM 442-443 XSI



LM-Arte Condensa

LMErgoSense

LM 488-489 ES

LMErgoMax

LM 488-489 XSI



LM-Arte Misura

LMErgoSense

LM 496-497 ES

LMErgoMax

LM 496-497 XSI



LM-Arte Posterior
Misura

LMErgoSense

LM 498-499 ES

LMErgoMax

LM 498-499 XSI



LM-Arte Fissura

LMErgoSense

LM 481-487 ES

LMErgoMax

LM 481-487 XSI



LM-Arte Eccesso

LMErgoSense

LM 307-308 ES

LMErgoMax

LM 307-308 XSI

Kahvavaihtoehdot:

LMErgoSense



Muhkea kahvamuotoilu on todettu tieteellisessä kliinisessä tutkimuksessa ergonomiseksi ja tehokkaaksi. Kahvaan voidaan asentaa RFID-siru - katso lisätietoja osoitteesta www.dentaltracking.com. Ø 13.7 mm

LMErgoMax



Klassinen, ergonominen muotoilu toimii hyvin kaikissa kliinisissä toimenpiteissä ja takaa erinomaisen tuntoherkkyyden. Ø 11.5 mm

LM-Arte Set

LMErgoSense


LM 6840 ES

LMErgoMax

LM 6840 XSI

LM-Arte Applica
LM-Arte Condensa
LM-Arte Fissura
LM-Arte Misura
LM-Arte Eccesso
LM-Servo 5



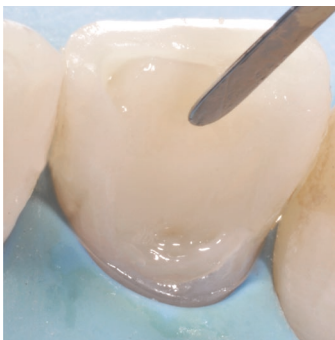

Applikoi joustavasti

LM-Arte Applicator


Erittäin ohut, joustava laastain on tarkoitettu yhdistelmämuovin viemiseen kaviteettiin sekä sen esteettiseen muotoiluun. Joustava terä tasoittaa ja muotoilee muovi-kerroksia hellävaraisesti ja tarkasti hampaan luontaisia muotoja seuraten. Applican ohut kärki mahdollistaa muotoilun myös ahtaissa paikoissa tai matriisinauhaa vasten.



Applikoi taittaen

LM-Arte Applicator Twist

Erittäin ohut, joustava ja kapea laastain yhdistelmämuovin kerrostamiseen. Instrumentin taivutetuilla kärjillä pystyy työstämään muovia erityisen hankalilla alueilla ilman että käden työasento vaikeutuu. Applicator Twistillä muotoilu onnistuu erityisen hyvin approksimaaliväleissä sekä paikkamarginaaleissa.

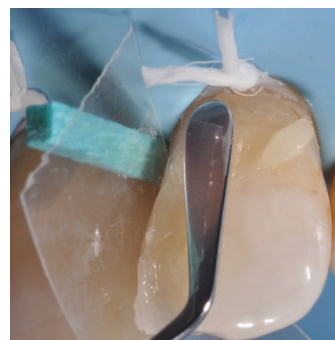


Muotoile joustavasti

LM-Arte Modella

Erittäin ohut ja leveä laastain yhdistelmämuovin työstämiseen. Sopii erityisesti isoille työstöpinnoille kuten etuhampaiden etuseinämään. Leveällä terällä saa tehokkaasti tasoitettua muovia laajalta alalta. Laastaimen joustavuus, ohuus ja terävyys auttaa tarkkojen yksityis- kohtien esteettisessä viimeistelyssä. Laastain sopii myös muovin applikointiin muoviviruisesta.




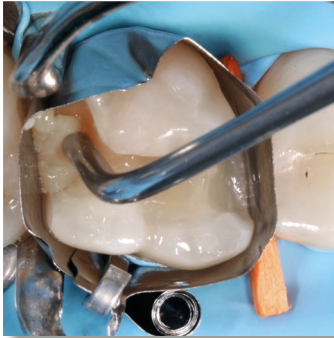

Paina pehmeästi

LM-Arte Condensa


Pitkä pyöreäreunainen yhdistelmä- muovitäppäin, joka on suunniteltu muovin muotoiluun. Täppäimien kaarretut varret mahdollistavat esteettömän pääsyn kaikkiin kaviteetteihin. Instrumentissa on sekä paksumpi että ohuempi kärki, joita voidaan käyttää etu- ja taka-alueen erikokoisissa kaviteeteissa. Kärjen pyöreä muotoilu estää muovia tarttumasta instrumenttiin täppäämisen aikana.

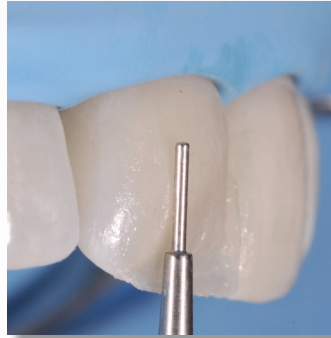

Mittaa tarkasti

LM-Arte Misura

Ainutlaatuinen instrumentti yhdistelmämuovin kerrospaksuuk-sien vertikaaliseen ja horisontaaliseen mittaamiseen etualueen paikoissa. Dentiinimuovin kerrostamisen jälkeen, mutta ennen sen valokovettamista, ohuempi koetinmainen kärki sovitetaan hampaan kiilteen päälle. Näin kärjen alle jäänyt vielä pehmeä dentiinimuovi muotoutuu niin, että kiillemuoville jää optimaalinen 0,5 mm - 0,7 mm tila. Instrumentin paksumpi ja lyhyempi kärki asetetaan horisontaalisesti dentiinivärin päälle siten, että kärjen reuna asettuu kiilteen päälle. Näin arvioidaan hiontarajaan laitettavan läpinäkyvän muovin määrää. Lopputuloksena saadaan esteettinen paikka, jossa on oikeassa suhteessa kerrostettu opaakkeja ja läpikuultavia muoveja ja vältetty luonnoton harmaa väri.

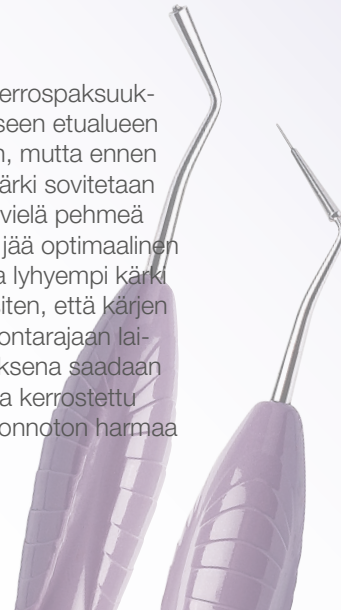

UUTUUS!



Mittaa ja muotoile

LM-Arte Posterior Misura

Taka-alueen versio suosittusta Misura-instrumentista. Suunniteltu täyteaineen kerrospaksuuksien vertikaaliseen mittaamiseen takaalueella. Instrumentin haarukkamainen kärki muotoilee reunaharjun matriisiin yli kopioiden naapurihampaan korkeuden ja anatomian.



Muotoile taidokkaasti

LM-Arte Fissura

Erittäin teräväkärkinen muotoilu-instrumentti. Kartiomainen kärki sopii erityisesti molaarien okklusaalipintojen anatomiseen muotoiluun. Ohut, koetinmainen kärki sopii optimaalisesti fissuuriden ja mamelonien muotoiluun sekä eristysaineiden etä karakterisointivärien applikointiin. Joustavuutensa ansiosta instru-


mentti soveltuu myös hellävaraiseen ylimääräisen sidosaineen tunnisteluun hampaiden pinnoilta.



Viimeistele siististi

LM-Arte Eccesso

Muovi- ja sidosaineylimääräien poistoon suunniteltu instrumentti. Kärjen muoto sopii erityisesti etualueen hammaskauloihin sekä approksimaaliväleihin molaarialueella. Terän optimoitu pituus, paksuus ja leveys tekee instrumentista ohuen mutta lajan.

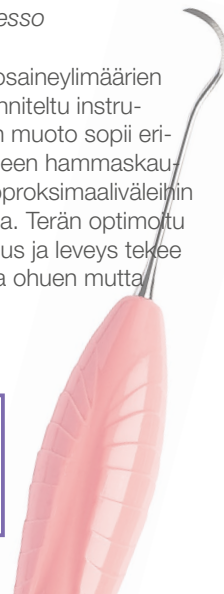

LM-Gengiva ienretraktion haasteisiin

Kervikaalileesion paikkaushoidossa tavoitteena on täydellinen saumatiivys, vahva sidos ja optimaalinen muovimateriaalin kiillotus. Mekaaninen retraktio vahingoittaa ientä, ellei toimenpidettä tehdä oikein.

Käyttämällä LM-Gengiva -instrumenttia ja ienretraktoreita vältetään ikenen vaurioituminen ja saavutetaan paras kliininen lopputulos. Tällä menetelmällä saavutetaan haluttu lopputulos: pehmytkudos ei vahingoitu ja esteettiset vaatimukset täyttyvät.

LM-Gengiva
ienretraktorisetti

LMErgoSense	LM 7556K ES
LMErgoMax	LM 7556K XSI

Sisältö: LM-Gengiva -käsi-instrumentti, siniset ienretraktorit (lajitelmassa noin 90 kappaletta, 30 kpl/ koko) ja LM-MultiLever käytettyjen retraktoreiden irrottamiseen.



Ienretraktorit

- Retraktorit siirtävät ikenen sivuun paikattavalta alueelta.
- Retraktorin jäykkyys mahdollistaa voimakkaan retraktion.
- Instrumenttia painettaessa retraktorit joustavat hieman mahdollistaen hyvän mukautuvuuden.
- Retraktori erottaa ikenen ja hampaan tiiviisti toisistaan.
- Retraktori suojaa ientä ja vähentää sidostamiongelmia.
- Sidostettava alue ja ienraja ovat esteettömästi näkyvissä. Täydellinen kontrasti pehmytkudoksiin.
- Ienretraktoria voidaan muokata poralla sopimaan hampaan juuren koveraan tai kuperaan vauriokohtaan.
- Sidostamateriaalit eivät tartu kärkien pintoihin.
- Ienretraktorit eivät häiritse polymerisaatiota.
- Ienretraktorit ovat kertakäyttöisiä.

LM Dental

LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Hammastarvikeliikkeistä!