

FR-Instructions de nettoyage et stérilisation - Utilisez ce miroir uniquement dans le cadre de sa fonction. - 1. Décontamination avant la 1ère utilisation et dès la fin de l'utilisation - 2. Nettoyage **manuel uniquement** - 3. Ringage à l'eau claire et séchage (inspection scrupuleuse) - 4. Conditionnement pour la stérilisation. - Stérilisation Autoclave (18 Min. à 134°C). Les miroirs dentaires ayant la surface réfléchissante fragile : évitez tout contact avec d'autres instruments durant ces procédés. Nettoyage en Ultrasons et thermodésinfecteur déconseillé. (T. max. 180°C)



EN-Sterilization instructions -For professional dental use only - 1. Disinfection before 1st use and right after use. 2. **Manual cleaning only**. 3. Rinse (with clear deionized water to avoid baked calcareous deposits), and dry. Careful inspection. 4. Package for sterilization. 5. Sterilization in Autoclave (18 Min. à 134°C). Careful inspection. - Mouth mirrors have a fragile reflecting surface: avoid any contact with other instruments during these processes. Avoid cleaning in ultrasounds. Avoid thermodesinfection to preserve the reflecting surface. Do not use brushes, coarse sponges or similar to avoid scratches on the mirror. Do not expose the mirror to temperatures over 180°C/360°F.



DE - Instruktionen zur Reinigung und Sterilisation - Dieses Spiegel gemäß den üblichen im Dentalbereich angewandten Methoden reinigen und sterilisieren. - Empfehlung : 1/Dekontamination sofort nach dem Gebrauch. 2/Reinigung **manuell**. 3/Abspülen mit **klarem Wasser** und trocknen (genaue Inspektion). 4/Verpackung für die Sterilisation. 5/Sterilisation Autoclave (18Min. bei 134°) - Hinweise : Sterilisierung vor dem ersten Gebrauch. Bitte die Anleitungen des Herstellers des benutzten Geräts beachten. Die Instrumente nicht einer Temperatur von mehr als 180°C/360°F aussetzen. Instrumente nur im Rahmen ihrer Funktion benutzen.



ES - Instrucciones de limpieza y esterilización - Este espejo debe limpiarse y esterilizarse según los usos en vigor en la profesión. - 1) Descontaminación en cuanto se haya terminado la utilización. 2) Limpieza **manual**. 3) Enjuague **con agua clara** y secado muy cuidadosamente. 4) Embalaje para la esterilización. 5) Esterilización en autoclave (18 min. a 134°C) - Precauciones : Esterilizar el instrumento antes de la primera utilización. Respetar las recomendaciones del fabricante de los aparatos empleados. No exponer el instrumento a temperaturas superiores a 180°C/360°F. Utilizar el instrumento solamente para la función por la cual está concebido.

Contrasteurs disponibles
Contrasters available
Kontraster verfügbar
Contrastadores disponibles

MZP215



MZP216




MZP217



MZP218



MZP219

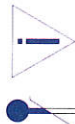

180°C
360°F



Dispositifs médicaux classe I €
PRODONT-HOLLIGER La Marnasse 63880 OLLIERGUES - France
Tél: +33 (0)4 73 95 56 42 Fax: +33 (0)4 73 95 56 99 - info@prodont-holliger.fr



date 06/2016