

Hampaanpoisto

- Vivut
- Luksointi-instrumentit
- Juurensirun poistajat



LM-hampaanpoistoinstrumentit

Uudet hampaanpoistoon tarkoitetut luksointi- ja vipuinstrumentit tutulla LM-ergonomialla

- Ergonominen muotoilu – istuu käteen ja helppo pyörittää
- Pitävä LM-ErgoTouch -pinta – lipsumaton ja kevyt ote
- Hyvin tasapainoitettu – kontrolloitu ote
- Kevyt – vähentää käden rasitusta
- Selkeä värikoodaus – helppo tunnistaa
- LM-DuraGradeMAX -superteräs – vahvat ja terävät työosat
- Terän tiivis liitos – hygieeninen



LM-TwistOut vivut

LM-TwistOut -instrumentti soveltuu hampaiden poistoon tilanteissa, joissa voimankäyttö ja vipuliikkeet ovat tarpeellisia.



LM-TwistOut S3
LM 814230

- suora 3 mm terä



LM-TwistOut S4
LM 814240

- suora 4 mm terä



LM-TwistOut S5
LM 814250

- suora 5 mm terä



LM-TwistOut C3
LM 814430

- taivutettu 3 mm terä



LM-TwistOut C4
LM 814440

- taivutettu 4 mm terä



LM-TwistOut C5
LM 814450

- taivutettu 5 mm terä



uutuus

LM-LiftOut luksointi-instrumentit

LM-LiftOut -instrumentin avulla hampaanpoisto voidaan suorittaa mahdollisimman atraumaattisesti. Tämä on tärkeää nopean paranemisen ja mahdollisen myöhemmän implantoinnin mahdollistamiseksi. Instrumentin ohut kärki viedään parodontaalirakoon ja hivutetaan kohti juuren apikaalista osaa, samalla edestakaisin hellävaroen kiertäen. LM-LiftOut ei sovellu vipuamiseen.



Huom! Käytä instrumentteja ainoastaan niihin toimenpiteisiin, joihin ne on tarkoitettu!

LM-LiftOut S2
LM 812220

- suora 2.5 mm terä



LM-LiftOut S3
LM 812230

- suora 3 mm terä



LM-LiftOut S4
LM 812240

-suora 4 mm terä



uutuus

Luksointi-instrumentit

LM-LiftOut S5
LM 812250

- suora 5 mm terä



LM-LiftOut C3
LM 812430

- taivutettu 3 mm terä



LM-LiftOut C4
LM 812440

- taivutettu 4 mm terä




LM-LiftOut C5
LM 812450

- taivutettu 5 mm terä



LM-SlimLift luksointi-instrumentit

LM-SlimLift – luksointi-instrumentit on suunniteltu sopimaan erityisesti ahtaisiin paikkoihin joihin perinteisillä luksointi-instrumenteilla ei pääse. Tämä mahdollistaa atraumaattisen hampaanpoiston ja edesauttaa kudoksen paranemisen nopeasti. Erittäin ohueksi muotoiltu instrumentin terä asetetaan kapeaan parodontaalirakoon ja hitaasti hivutetaan kohti juuren kärkeä edestakaisella liikkeellä. LM-SlimLift ei sovellu vipumiseen.

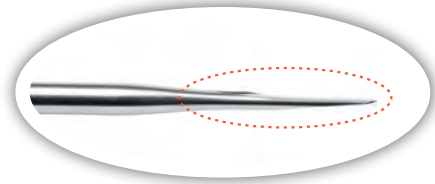

Terän erittäin ohut muotoilu mahdollistaa mitä atraumaattiset poistot.

LM-SlimLift S3
LM 812630

- suora 3 mm terä



LM-SlimLift S4
LM 812640

- suora 4 mm terä



LM-SlimLift S5
LM 812650

- suora 5 mm terä



LM-SlimLift C3
LM 812830

- taivutettu 3 mm terä



LM-SlimLift C4
LM 812840

- taivutettu 4 mm terä



LM-SlimLift C5
LM 812850

- taivutettu 5 mm terä



LM-SlimLift-luksointi-instrumenttien kasetti on yhteensopiva LM-ServoMax-tarjottimen kanssa, katso sivu 81.

Poistoinstrumenttien huolto

Kasetti poistoinstrumenteille

LM-LiftOut, LM-SlimLift ja LM-TwistOut -instrumentit toimitetaan kätevässä kasetissa, joka suojaa sekä instrumenttia että käsittelijää huoltokierron aikana.

Kasetissa steriloitu instrumentti ei puhko pussia ja pysyy näin varmemmin steriilinä. Kasetin voi värikoodata, katso sivu 77.

LM:n poistoinstrumenttien kasetti on yhteen sopiva LM-ServoMax -tarjottimen kanssa, katso sivu 76.



Teroituskivi LM 818002

Teroita poistoinstrumentit helposti ja nopeasti pyöreällä teroituskivellä. Se on yksinkertainen ja nopea tapa pitää ne parhaassa terässä ja aina käyttövalmiina.

-sopii työstettäväksi LM-SlimLiftin, LM-LiftOutin, LM-RootOutin ja LM-TwistOutin kanssa



Juurensirun poisto instrumentit

uutuus

Root Tip Pick LM 769-771 XSI

- juurensirun poistoon
- soveltuu hyvin vaikeapääsyisille alueille
- saatavana vain LM-ErgoMax (XSI) kahvalla



uutuus

LM-RootOut LM 812210

- suunniteltu hienovaraisiin juurensirun poistoihin
- ei suositella voimaa vaativaan juurensirun poistoon
- muistuttaa Heidbrinkin juurensirun poistajia
- ergonomisesti muotoiltu kahva takaa hyvän otteen

