

PAIKKAA KORJAA SEMENTOI

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW



KOLME JUOKSEVUUDEN TASOA ERI TARPEISIIN

Universaalit juoksevat CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow -yhdistelmämuovit on palkittu jo viitenä vuotena peräkkäin. Näillä yhdistelmämuoveilla on nyt kolme erilaista juoksevuutta. Eri juoksevuudet soveltuvat eri tarpeisiin ja takaavat helpot, kestävät ja esteettiset täytteet. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow tarjoaa täydellisen ratkaisun hyvin erilaisiin indikaatioihin. Et tarvitse muita yhdistelmämuoveja.

- ✓ Erinomainen kiillon pysyvyys
- ✓ Helppo kiillottaa
- ✓ Kestävät täytteet
- ✓ Moniin eri indikaatioihin

High

Low

Super Low

JUOKSEVUUS



SUURI JUOKSEVUUS

- ✓ Erinomainen kastelevuus ja mukautuminen
- ✓ Lineriksi
- ✓ Pieniin täytteisiin



KESKITASON JUOKSEVUUS

- ✓ Soveltuu hyvin monenlaisiin etu- ja taka-alueen täytteisiin




PIENI JUOKSEVUUS

- ✓ Ihanteellinen taka-alueen kuspeihin ja harjanteisiin
- ✓ Pitää muotonsa


MONIIN ERI INDIKAATIOIHIN

- ✓ Suorat täytteet kaikissa kaviteetti luokissa I-V, kervikaaliset leesiot (esim. juuripinnan karies, v:n muotoiset defektit), hampaiden kulumisen ja eroosio
- ✓ Kaviteetin pohja/liner
- ✓ Hampaan asennon ja muodon korjaus
- ✓ Lohjenneiden täytteiden korjaukset
- ✓ Keraamisten ja yhdistelmämuovista valmistettävien inlay- ja onlay-täytteiden sekä alle 2 mm paksujen laminaattien sementointi

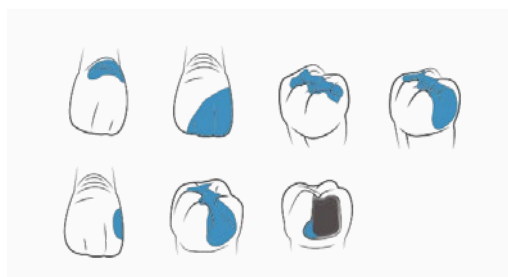

ERINOMAINEN KIILOTTETTAVUUS SAA VÄLITTÖMÄSTI AIKAAN LUONNOLLISEN JA KESTÄVÄN KIILOTTON

Kuraray Noritake Dentalin kehittämän silanointiteknologian ansiosta mikronia pienemmät täyteainepartikkelit kiinnittyvät kestävästi toisiinsa, mikä tekee täyteen pinnasta erittäin kiiltävän ja helposti kiillotettavan. Valon diffuusioklusterien valoa taittavien ominaisuuksien ansiosta värisävy mukautuu täydellisesti hammasrakenteeseen, jolloin lopputuloksena on erittäin esteettinen täyte.

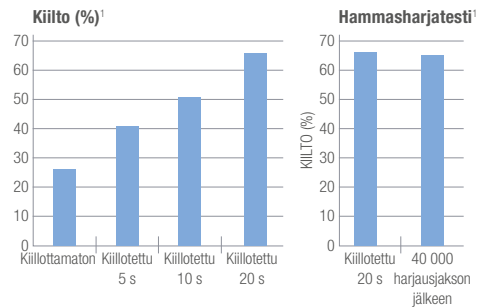

HUIPPULUOKKAISET MEKAANISET OMINAISUUDET

Kuraray Noritake Dentalin kehittämä silanointiteknikka mahdollistaa suuren filleripitoisuuden (jopa 78 p-%, 64 til-%) ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, joiden ansiosta materiaali soveltuu myös taka-alueen täytteisiin.

	Taivutuslujuus	Puristuslujuus
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

Standardin ISO 4049:2009 mukaan. Lähde: Kuraray Noritake Dental Inc.


ERINOMAINEN KÄSITELTÄVYYS

Suunniteltu parhaat käsiteltävyysominaisuudet mielessä. Eri fillerien muoto ja koko takaavat pastan erinomaisen käsiteltävyyden, mikä helpottaa muotoilua.


- ✓ Tarttumaton yhdistelmämuovi.
- ✓ Ruiskun erityinen sisämuoto minimoi ilmakuplat annosteltaessa.

VÄRIVALIKOIMA


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

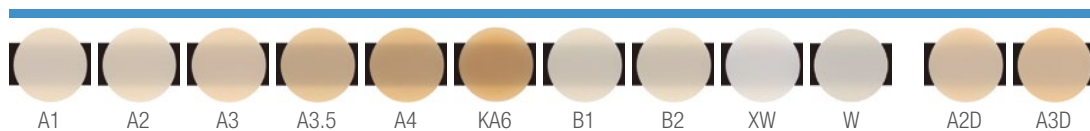

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

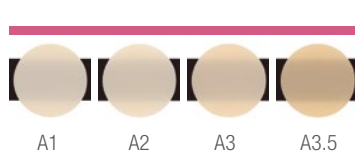

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

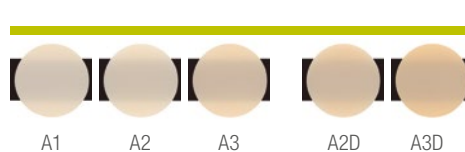

TUOTETIEDOT CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

TUOTENRO	SISÄLTÖ
#3341-EU	Super Low (A1) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3342-EU	Super Low (A2) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3343-EU	Super Low (A3) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3344-EU	Super Low (A3.5) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3301-EU	Low A1 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3302-EU	Low A2 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3303-EU	Low A3 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3304-EU	Low A3.5 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3305-EU	Low A4 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3306-EU	Low KA6 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3307-EU	Low B1 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3308-EU	Low B2 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3309-EU	Low XW 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3310-EU	Low A2D 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3311-EU	Low A3D 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3312-EU	Low W 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä

TUOTENRO	SISÄLTÖ
#3321-EU	High (A1) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3322-EU	High (A2) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3323-EU	High (A3) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3324-EU	High (A2D) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3325-EU	High (A3D) 1 ruisku (2,7g/1,5ml), 15 neulakärkeä
#3331-EU	Neulakärjet (N) 20 neulakärkeä

Plandent

Plandent Oy, Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Puhelin: 020 368 680
www.plandent.fi

Lisätietoja on osoitteessa kuraraynoritake.eu/fi/clearfil-majesty-es-flow