

kuraray

Noritake

Just blend in!

SE SULAUTUU YMPÄRISTÖÖNSÄ!

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Aina käyttäessäsi tätä intuitiivista yhdistelmämuoviratkaisua hämmästyit, miten se sulautuu ympäristöönsä.



KUVITTELE YHDISTELMÄMUOVIRATKAISU, JOKA HELPOTTAÄ TYÖTÄSI

Keskity tekemään sitä, mistä pidät eniten.

Käyttäessäsi uutta CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 -yleisyhdistelmämuovia tapahtuu jotain yllättävää. Kuvittele, että applikoit luokan III kaviteettiin yhdistelmämuoviresiiniäytettä. Onko kerrostaminen vaikeaa? Premium-kiilteellä ja dentiinisävyllä voit kopioida luonnon omia kiille- ja dentiinikerroksia. Onko aikaa vähän? Voit valita myös yksikerroksisen Classic-sävyä. Täydellisen sopivuuden takaamiseksi hampaaseen olemme edelleen optimoineet pastan koostumusta. Tämän ansiosta voit kerrostaa varmana lopputuloksesta. Kun täyte on valmis, hämmästyä siitä, miten se sulautuu ympäristöönsä.

MAAILMAN ENSIMMÄINEN SÄVYRATKAISU

Jokaista yksityiskohtaa on suunniteltu yhä uudelleen seitsemän vuoden ajan.

Koet ainutlaatuisen työnkulun ensimmäisestä täyteestä lähtien. Maailman ensimmäiseen suorien yhdistelmämuovien värisävyratkaisuun tarvitaan vain kolme osaa: yksikerroksiset Classic-sävyt, monikerroksiset Premium-sävyt (kiilteen ja dentiinin sävyt sekä läpikuultavat sävyt) sekä intuitiivinen sävyopas, jotka kaikki VITA™ on hyväksynyt.

Viimeisten seitsemän vuoden aikana olemme suunnitelleet uudelleen jokaisen yksityiskohdan, jotta täyteistä saadaan kauniita, ennakoitavampia ja pitkäikäisempiä. Tuomalla CLEARFIL MAJESTY™ ES-2:n markkinoille olemme ehkä luoneet uuden standardin.





INTUITIIVINEN SÄVYJÄRJESTELMÄ

Kalibroitu VITA™-standardin mukaisesti.

Oikean sävyn valitseminen ei koskaan ole ollut tarkempaa. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2:n myötä markkinoille tulee maailman ensimmäinen sävyn kirkkauteen perustuva sävyjärjestelmä suorille yhdistelmämuoveille – VITA™:n hyväksymänä. Tämä lähestymistapa on keskeinen, kun pyritään täytteen luonnollisen ulkonäköön.

Oikean värisävyn valitseminen tapahtuu muutamassa sekunnissa vain kuudesta liuskasta. Liuskat on järjestetty vaaleasta tummaan (valkoisesta A4:ään), jotta sävyn valinta on mahdollisimman tarkka. Jos valitset A2-ryhmän, voit heti aloittaa työskentelyn Premium A2E- (kiille) ja A2D-sävyillä (dentiini). Jos haluat mieluiten käyttää yhden sävyn tekniikkaa, valitse ensin A2-ryhmä ja tämän jälkeen toisessa vaiheessa parhaiten soveltuva Classic-sävy D2, A2 tai C1.

Koskaan aiemmin sävyopas ei ole ollut näin kompakti: 18 Premium-sävyä, mukaan lukien 7 kiilteen ja 7 dentiinin sävyä, sekä 4 läpikuultavaa sävyä. Kun tähän lisätään 18 Classic-sävyä, käytössäsi on yhteensä 36 sävyä, jotka helposti sopivat taskuusi.


VAIN KAKSI VAIHETTA ON TARPEEN

Vaihe 1 – valitse kirkkaus

Valitse lähin vastaava kirkkaus-liuska kuudesta näkyvissä olevasta sävyoppaan liuskavaihtoehdosta

Vaihe 2 – Valitse värisävy ja värikylläisyys.

Vedä valittu liuska sävyn pitimestä ja valitse vastaava sävy.

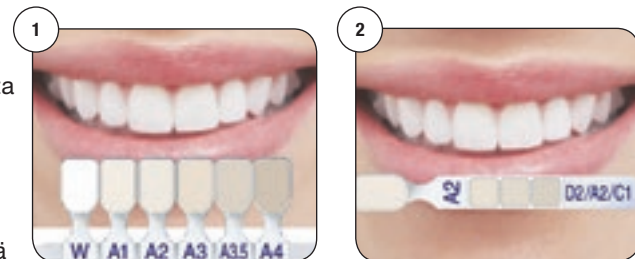


VAKUUTTAVA SÄVYVALIKOIMA

Yksi Premium-sävy-yhdistelmä kattaa nyt kolme VITA™ Classical -sävyä.

Uskomatonta mutta totta: esteettisen yhdistelmämuoviratkaisumme ansiosta voit kattaa myös kolme VITA™-sävyä vain yhdellä Premium-kiilteen ja dentiinisävyyn yhdistelmällä, kuten A1E ja A1D. Tämä on mahdollista kirkkauteen perustuvien sävyryhmien ansiosta, jotka perustuvat kolmeen sävyyn.

Jos sävytät kolme A2-ryhmän hammasta viikon aikana, voit käyttää esimerkiksi A2E:tä ja A2D:tä C1-hampaan täytteeseen maanantaina, D2-hampaaseen keskiviikkona ja A2-hampaaseen torstaina. Eikö tämä ole aivan uskomatonta? Eikä tähän tarvita monimutkaista sävyohjetta. Sinun tarvitsee vain kopioida luonnon kahta kerrosta.

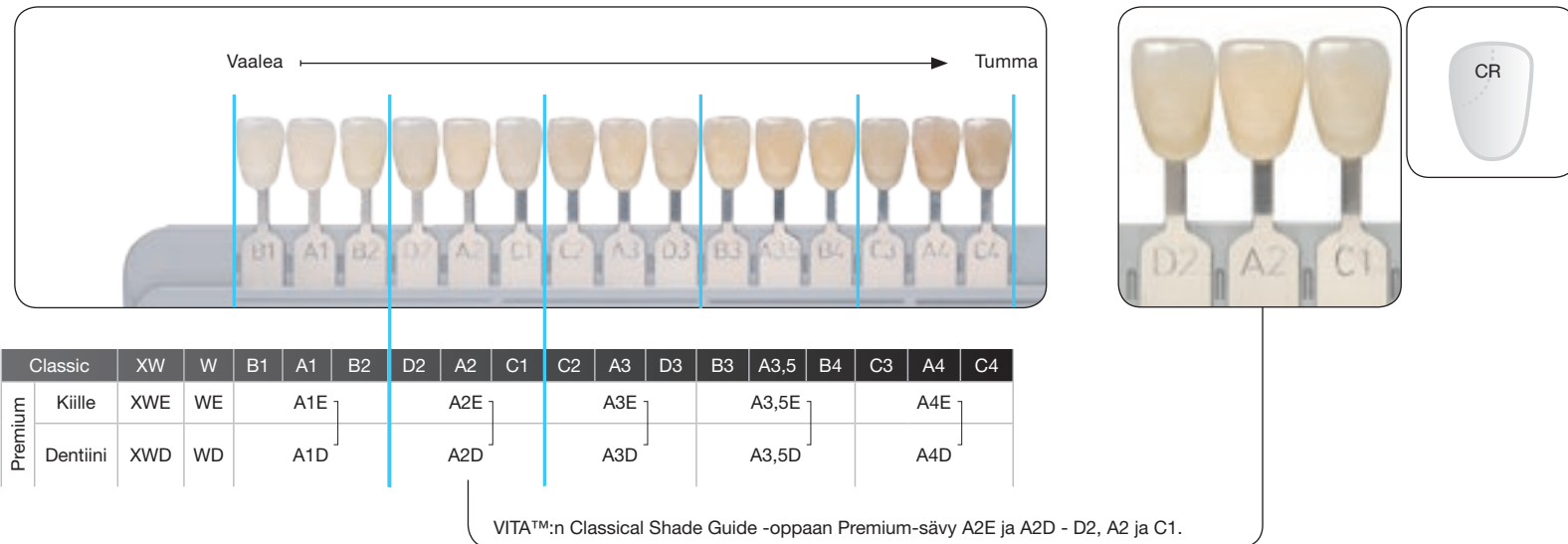

LUONNOLLISTA SUUNNITTELUA

Anatomista kerrostusta Premium-kiilteellä ja dentiinisävyillä.

Koe yhdistelmämuoviratkaisumme intuitiivisuus. Voit aloittaa heti ilman huolta vaikeista väriyhdistelmistä tai monimutkaisista ohjeista. Sinun tarvitsee vain kopioida luonnon omia kiille- ja dentiinikerroksia. Aloita luonnollisen tuloksen suunnittelu valitsemillasi **Premium-sävyillä**. Keskity tekemään sitä, mistä pidät eniten.

Katsotaanpa, miten tri **Hirofumi Tashiro** tekee luokan IV täytteen hampaaseen 21. Ensin hän poistaa vanhan täytteen ja suorittaa valmistelut. Hän hakee oikeaa sävyä VITA™ Classical -sävyoppaasta ja valitsee A2:n. Anatomista kerrostusta varten hän valitsee A2E:n (kiille) ja A2D:n (dentiini). Tässä tapauksessa hän tuottaa palataalisen kiilteen ensimmäiseksi kerrokseksi silikonimallin avulla. Sisäinen dentiini (A2D) asetetaan päällimmäiseksi ja sen jälkeen tulee ulompi kiillekerros (A2E). Lopputuloksesta nähdään, miten ratkaisu sulautuu muiden hampaiden väriin.



Lähde:
Japanilainen tri Hirofumi Tashiro

PARAS HAMPAIDEN LUONNOLLISEN VÄRISÄVYN KALTAINEN LOPPUTULOS

Tämä on värin kirkkauden, anatomisen kerrostuksen ja Light Diffusion Technology -tekniikan ansiota.

Kuvittele, että tämän esimerkin innostamana tilaat ensimmäiset värisävyt. Kun ensimmäinen täyte on valmis, ihaillet varmasti hyvältä näyttävää lopputulosta. Kiilteen ja yhdistelmämuovin rajaa ei enää voi erottaa.

Miten tämä on mahdollista? Tarkastellaanpa kolmea tämän takana olevaa ajatusta. Kuvittele, että tämän esimerkin innostamana tilaat ensimmäiset värisävyt. Kun ensimmäinen täyte on valmis, ihaillet varmasti hyvältä näyttävää lopputulosta. Kiilteen ja yhdistelmämuovin rajaa ei enää voi erottaa.

Miten tämä on mahdollista? Tarkastellaanpa kolmea tämän takana olevaa ajatusta.

1. VAALEASTA TUMMAAN

Miksi päähuomio on värin kirkkaudessa?

Kutsumme uutta kirkkauteen perustuvaa värisävyjärjestelmäämme intuitiiviseksi. Miksi kirkkaus? Tämä johtuu siitä, että kirkkaus määrää 90 % värisävystä, joka koostuu värisävyn ominaisuuksista ”kirkkaus”, ”sävy” ja ”värikylläisyys”. Miltä luonnollisten hampaiden värisävyalue näyttää eri puolilla maailmaa? VITA™:n värisävyjä koskevan tutkimuksen mukaan kukin sävyalue vaihtelee laajemmin kirkkauden kuin sävyn ja värikylläisyyden mukaan. Ellipsin muoto johtuu luonnollisista kirkkauseroista. Tämän perusteella on ymmärrettävää, että tärkeintä on saavuttaa oikea kirkkaus.

2. LUO LUONNOLLISTA SYVYYTTÄ




Ennalta määriteltä kiilteen läpikuultavuus ja dentiinin läpikuultamattomuus.

On yllättävää, että läpikuultamattomuuden merkitystä aliarvioidaan onnistuneen hammas-yhdistelmämuovi-integraation saavuttamisessa. Jos läpikuultamattomuus ei ole oikeanlainen, täytteen värisävy ei ole oikea. Uuteen CLEARFIL MAJESTY™ ES-2:een suunniteltiin ennalta määriteltä kiilteen läpikuultavuus ja dentiinin läpikuultamattomuus. Sinun tarvitsee ainoastaan kopioida luonnolliset paksuudet ja korvata kiille ja dentiini Premium-värisävyillä.

3. LUONNON JA YHDISTELMÄMUOVIN LIITTO

Light Diffusion Technology -tekniikka säätää sävyn ja värikylläisyyden.

Kun oikea värisävy on valittu ja läpikuultamattomuusarvot määriteltä ennalta, Light Diffusion Technology -tekniikka viimeistelee lopputuloksen. Se mukauttaa oikean värisävyn (esimerkiksi keltainen tai punainen) ja värikylläisyyden muiden hampaiden hammaskudoksen mukaan.

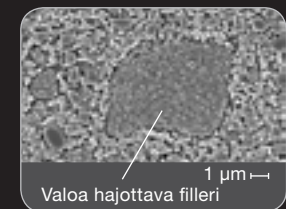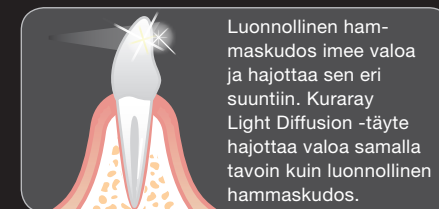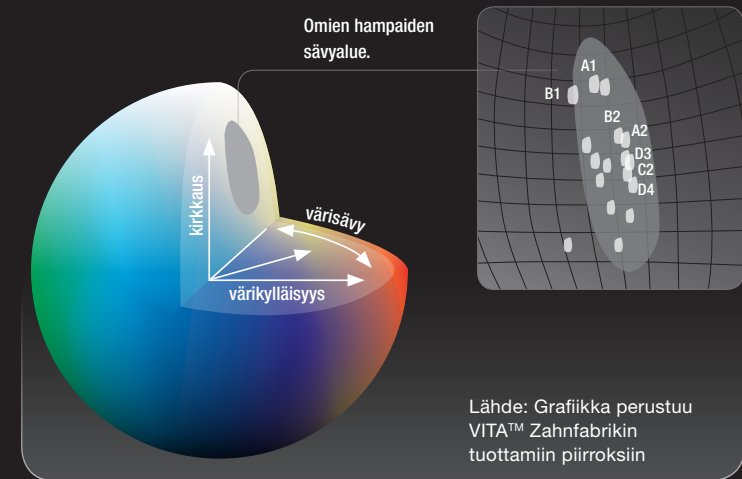

Lähde: Tri Toshimoto Yamada, DDS, PhD, Toranomom

TILAUSOHJEET I

RUISKU- JA KAPSELITÄYTTÖPAKKAUS CLASSIC*

	A1	A2	A3	A3.5	A4	A6
Ruisku	#3020-EU	#3021-EU	#3022-EU	#3023-EU	#3024-EU	#3025-EU
PLT	MD128180	MD128176	MD128181	MD128182	MD128177	MD131050

	B1	B2	B3	B4
Ruisku	#3026-EU	#3027-EU	#3028-EU	#3029-EU
PLT	MD131051	MD128178	MD128183	MD131052

	C1	C2	C3	C4
Ruisku	#3030-EU	#3031-EU	#3032-EU	#3033-EU
PLT	MD131053	MD131054	MD128179	MD131055

	D2	D3	XW	W
Ruisku	#3034-EU	#3035-EU	#3036-EU	#3037-EU
PLT	MD131056	MD131057	MD147700	MD147701

RUISKU- JA KAPSELITÄYTTÖPAKKAUS PREMIUM**

Dentiini	XWD	WD	A1D	A2D	A3D	A3.5D	A4D
Ruisku	#3062-EU	#3063-EU	#3057-EU	#3058-EU	#3059-EU	#3060-EU	#3061-EU
PLT	MD132151	MD132152	MD132130	MD132131	MD132148	MD132149	MD132150

Kiille	XWE	WE	A1E	A2E	A3E	A3.5E	A4E
Ruisku	#3055-EU	#3056-EU	#3050-EU	#3051-EU	#3052-EU	#3053-EU	#3054-EU
PLT	MD132128	MD132129	MD132123	MD132124	MD132125	MD132126	MD132127

Läpikuultava	Clear	Blue	Gray	Amber
Ruisku	#3064-EU	#3066-EU	#3067-EU	#3065-EU
PLT	MD132153	MD132155	MD132156	MD132154

Sävyoppaan värit saattavat poiketa painoväleistä.

* Jokainen Classic-ruisku sisältää 3,6 g/2,0 ml ja jokainen Classic PLT -täyttöpakkaus sisältää 20 kärkeä x 0,25 g.

** Jokainen Premium-dentiini- ja kiilleruiskutäyttöpakkaus sisältää 3,6 g/2,0 ml ja jokainen Premium-läpikuultava ruiskun täyttöpakkaus sisältää 1,8 g/0,9 ml. Jokainen Premium PLT -täyttöpakkaus sisältää 10 kärkeä x 0,25 g.

TILAUSTIEDOT II

PAKKAUKSET



#3010-EU-ammattilaisruiskusarja

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D:
1 ruisku värisävyä kohden (3,6 g/2,0 ml) + kirkas, kellanruskea, sininen, harmaa
1 ruisku värisävyä kohden (1,8 g/0,9 ml) + sävyopas



#3100-EU PLT -ammattilaissarja

Classic A1, A2, A3, A3.5, Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D,
kirkas, kellanruskea, sininen, harmaa:
Sarjassa 5 kärkeä (0,25 g) + sävyopas



#3012-EU ruiskujen tutustumissarja

Classic A2, Premium A2D, A2E:
1 ruisku värisävyä kohden (1,2 g/0,7 ml)



#3102-EU PLT-tutustumissarja

Classic A2, Premium A2D, A2E:
5 ruiskua värisävyä kohden (0,25 g)

SÄVYOPAS



MD130688 sävyopas

Kaikki sävyt



MD130689 kompakti sävyopas

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,
B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2,
D3, XW, W

YHTEYSTIEDOT



Plandent Oy
Asentajankatu 6, FI-00880 Helsinki
Tel. +358 20 7795 200 | www.plandent.fi

Kuraray Noritake Dental Inc.

"CLEARFIL MAJESTY" on Kuraray Co., Ltd:n tavaramerkki.
"VITA" on VITA™:n tavaramerkki, jonka omistaa
VITA™ Zahnfabrik, Bad Säckingen, Saksa.